


Pango

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PNG-M15 Мини-Массажер

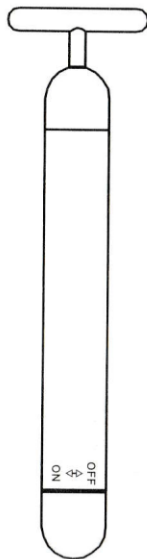

Спасибо за Ваш выбор мини массажера Pango для лица и тела, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее для информации на будущее

В изделии использованы безопасные и экологически чистые продукты. Без токсинов и фталевой кислоты.

### » Особенности изделия

PNG-M15 представляет собой мини-атюрный электровибромассажер новой, инновационной разработки, использующей микрочастотную вибрационную технологию на основании традиционной китайской медицины, высоко ценящей массаж и воздействие на точки акупунктуры тела для улучшения циркуляции крови и метаболизма клеток, удаления темных кругов под глазами, тени и отеков кожи вокруг глаз. Массажер влагозащищенный. Прекрасно подходит для разглаживания кожи лица. Делает Ваш вид здоровым, а Вашу кожу сияющей.

### » Назначение


1. Для массажа кожи вокруг глаз, для придания ей упругости, устранения темных кругов, отеков и возвращения коже эластичности.
2. Может применяться для лучшего впитывания косметических средств.
3. Прекрасно подходит для массажа всего лица по направлению массажных линий. По схемам массажа рекомендуем проконсультироваться у специалиста.

### » Строение массажера




### » Включение/выключение массажера

Включение: поверните поворотный выключатель влево (против часовой стрелки) включится режим вибрации

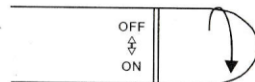

Чтобы включить поверните влево (против часовой стрелки)


2. Выключение: Поверните вправо (по часовой стрелке) поворотный выключатель. Массажер остановит работу.

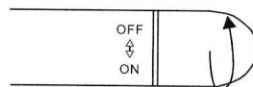

Чтобы выключить поверните вправо (по часовой стрелке)

### » Замена батареи

1. Поверните поворотный выключатель влево (против часовой стрелки) снимите поворотный выключатель, как показано ниже:

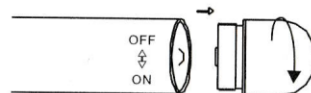

против часовой стрелки

2. Извлеките старую батарейку и вставьте новую батарейку в корпус, следует помнить: отрицательный полюс уходит внутрь корпуса



полюса батарейки

- Накройте крышкой (поворотным выключателем) и поверните вправо (по часовой стрелке), чтобы плотно закрутить крышку-выключатель, как показано ниже:



поверните по часовой стрелке

**Жокалуиста, обратите внимание:** при повороте влево для снятия крышки : целью замены батареи массажер продолжает работу. Просто продолжайте иращение, чтобы снять крышку.

огда батарейный отсек открыт или когда массажер выключен, держите его юдальше от воды, чтобы влага его не повредила

### » Применение

.. Держите массажер за нижнюю третью часть корпуса, если держать его слишком близко к головке, это будет влиять на эффект вибрации

!. Массируйте лицо по рекомендации специалиста, обычно медленно вверх и изнутри наружу

!. Кончики "Т"-образной головки можно использовать для точечного массажа.

!. Применение массажера помогает эффективному использованию косметических средств

### » Меры предосторожности

.. Не держите прибор вблизи источников огня или высокой температуры

!. Не используйте устройство во время вождения автомобиля

!. Не трогайте силиконовое влагозащитное кольцо внутри массажера, чтобы избежать его повреждения и нарушения влагозащиты

!. Не используйте массажер на участках

кожи после лечения, при опухали или покраснениях кожи, после хирургических операций.

5. Выньте батарею из массажера, если долгое время не используете его, во избежания утечки щелочи из батареи.

6. Прибор не предназначен для медицинских целей

7. Не открывайте его при чистке водой

8. Пожалуйста, прекратите пользование массажером, если у Вас появятся неприятные ощущения или Вы почувствуете себя плохо.

### » Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы в использовании устройства, пожалуйста, проверьте следующие пункты, прежде чем связаться с Pango отделом обслуживания для консультации или ремонта.

Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно

Основные неисправности	Возможная причина	Как исправить
Не удалось включить	Не достаточно мощности	Если да, то замените батарейку на новую
	Проверьте установку батареи	Убедитесь что полярность батареи установлена в правильном направлении
Слабая вибрация	Заряд батареи слабый	Замените старые батареи на новые

### » Технические параметры:

В условиях нормальной эксплуатации:

Диапазон температуры окружающей среды: +5 °C ~ +40 °C;

Диапазон относительной влажности:

≤ 80%;

Диапазон атмосферного давления :

860 гПа ~ 1060 гПа

Вес нетто 69г

Потребляемая мощность: 0.32 Вт

Артикул: PNG-M15

Напряжение: 1.5 В

Мощность: 0.75 Вт

Питание AA батарея (1шт)

### » Техническое обслуживание

1. Храните массажер в сухом и чистом месте

2. Протрите изделие без применения спирта после выключения питания

3. Не кладите тяжелые вещи на прибор

4. Включите прибор с новой батарейкой, чтобы проверить работу, если прибор хранится на складе более 6 месяцев.

5. Не разбирайте изделие самостоятельно, в случае каких-либо проблем попросите специалиста проверить.

Страна происхождения: Китай

Поставщик : Нингбо Панго Медикал Инструмент Индустри энд Трэйд Ко. Лтд.

Адрес: 315191, Китай, Нингбо, Джиангшан таун

Импортер: ООО «Технологии качества жизни»

Адрес: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, пом. 1, комн.10

Сайт: www.pango.ru